


Brugervejledning

Pilleæske 4 store rum og lydalarm

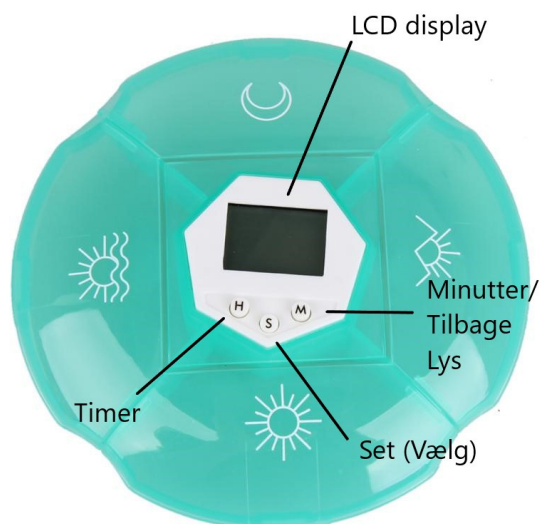

Hold **S**-knappen nede i tre sekunder for at aktivere timeren.

Indstil tiden

1. Tryk fem gange på **S**-knappen til uret og ur-ikonet blinker
2. Tryk på **H**-knappen til det ønskede timetal vises
3. Tryk på **M**-knappen til det ønskede minuttal vises
4. Tryk på **S**-knappen for at bekræfte tiden

Indstil alarm

1. Tryk en gang på **S**-knappen (når skærmen viser klokken) for at sætte den første alarm. 1-tallet øverst på skærmen blinker.
2. Tryk på **H**-knappen til det ønskede timetal vises
3. Tryk på **M**-knappen til det ønskede minuttal vises
4. Tryk på **S**-knappen for at bekræfte tiden
5. En prik • vil nu fremstå øverst på skærmen over 1-tallet.
6. Gentag denne fremgangsmåde for at sætte den anden, tredje og fjerde alarm. En prik • vil fremstå øverst på skærmen over 2, 3, eller 4-tallet.
7. De fire alarmer lyder forskelligt.

Slet alarm

1. Tryk på **S**-knappen en til fire gange alt efter hvilken alarm, du ønsker at slette (1 eller 2 eller 3 eller 4). Det tilsvarende alarmsymbol vil blinke.
2. Tryk på **H** og **M**-knappen samtidig til alarmeren er slettet
3. Prikken • vil forsvinde over den tilsvarende alarm

LED lys

Tryk på en vilkårlig knap for at tænde LED-lyset. LED-lyset vil lyse, når alarmeren går i gang.