


# Pilleæske med en timer – nøglering

## Brugervejledning


Tak for dit køb af denne pilleæske. Pilleæsken fungerer, som et perfekt redskab til at hjælpe dig med at huske på, hvornår du skal tage din medicin, og er ideel til at opbevare din medicin sikkert og nemt.

Læs venligst denne brugermanual grundigt igennem inden du bruger dette produkt. Vi anbefaler, at du gemmer denne manual.

## Produktoversigt

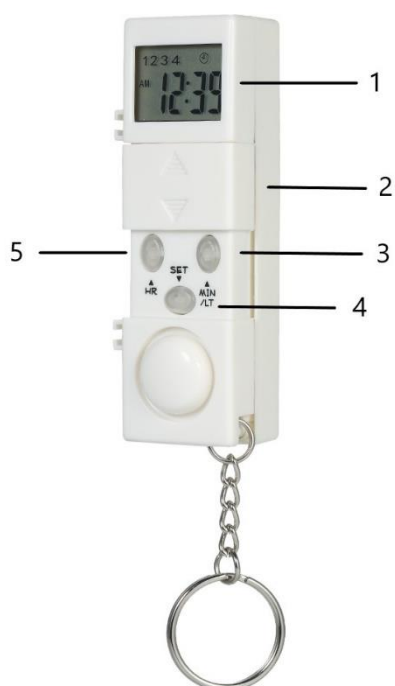

1. LCD-display
2. Beskyttelseshætte til knapperne
3. Minutter/Lys (Min/LT) Set (vælg)
4. Set (SET) (vælg)
5. Timer (HR)

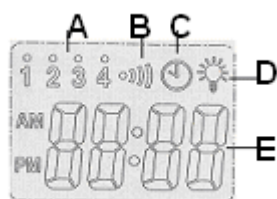

- A. Indikator af alarmer
- B. Lyd-symbol
- C. Ur-symbol
- D. Lys-ikon
- E. Klokkeren

## Udskift/fjern pillerummene fra æsken

Sæt pillerummene til timeren eller til andre pillerum ved at glide de små stolper på siden af æskerne oppe fra og ned.

## Installation af batterierne

Timeren bruger 2 AAA-batterier. For at installere eller udskifte batterierne følg da venligst følgende fremgangsmåde:

1. Fjern plastikhætten, der er placeret over batterierne
2. Indsæt AAA-batterierne og vær opmærksom på, at de vender korrekt
3. Sæt plastikhætten på igen
4. Timeren er nu klar til brug. **Hold knappen SET inde i tre sekunder for at aktivere timeren.**



## Indstil tiden

1. Tryk fem gange på **SET**-knappen så tiden og ur-ikonet blinker
2. Tryk på **HR**-knappen gentagne gange til den ønskede time er valgt
3. Tryk på **MIN/LT**-knappen gentagne gange til det ønskede minutantal er valgt
4. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte din tidsindstilling
5. Tryk på **MIN**- og **HR**-knappen samtidig for at skifte mellem et 12 og 24 timer ur

## Indstil daglig alarm (alarmen bipper i 1 minut)

### Indstil den første alarm



1. Ved at trykke på **SET**-knappen en gang (når skærmen viser klokken) vil alarmindstillingerne til den første alarm starte. Symbolet **1** blinker.
2. Tryk på **HR**-knappen gentagne gange til den ønskede time er valgt
3. Tryk på **MIN/LT**-knappen gentagne gange til det ønskede minutantal er valgt
4. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte din indstilling
5. Herefter vil en prik • dukke op oven over symbolet **1**

### Indstil den anden alarm



1. Ved at trykke på **SET**-knappen to gang (når skærmen viser klokken) vil alarmindstillingerne til den anden alarm starte. Symbolet **2** blinker.
2. Tryk på **HR**-knappen gentagne gange til den ønskede time er valgt
3. Tryk på **MIN/LT**-knappen gentagne gange til det ønskede minutantal er valgt
4. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte din indstilling
5. Herefter vil en prik • dukke op oven over symbolet **2**

### Indstil den tredje alarm



1. Ved at trykke på **SET**-knappen tre gang (når skærmen viser klokken) vil alarmindstillingerne til den tredje alarm starte. Symbolet **3** blinker.
2. Tryk på **HR**-knappen gentagne gange til den ønskede time er valgt
3. Tryk på **MIN/LT**-knappen gentagne gange til det ønskede minutantal er valgt
4. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte din indstilling
5. Herefter vil en prik • dukke op oven over symbolet **3**

### Indstil den fjerde alarm



1. Ved at trykke på **SET**-knappen fire gang (når skærmen viser klokken) vil alarmindstillingerne til den fjerde alarm starte. Symbolet **4** blinker.
2. Tryk på **HR**-knappen gentagne gange til den ønskede time er valgt
3. Tryk på **MIN/LT**-knappen gentagne gange til det ønskede minutantal er valgt
4. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte din indstilling
5. Herefter vil en prik • dukke op oven over symbolet **4**

## Afbryd alarm

Tryk på en af indstillingsknapperne for at afbryde alarmen, når den bipper (**HR**, **MIN/LT** eller **SET**). Afbryder du ikke alarmen, vil timeren bippe en enkelt gang hver 20. sekund i 30 minutter eller indtil den slås fra.

## Nulstil daglig alarm

1. Tryk på **SET**-knappen til den ønskede daglige alarm vises på skærmen og det tilsvarende symbol (**1** eller **2** eller **3** eller **4**) blinker
2. Hold **HR** og **MIN/LT**-knappen nede samtidig til tidspunktet for alarmeren viser 00:00 og prikken • oven over symbolet (**1** eller **2** eller **3** eller **4**) forsvinder
3. Tryk på **SET**-knappen en enkelt gang for at bekræfte

## Lys i skærmen

Tryk på **MIN/LT**-knappen for at tænde for lyset i skærmen. Lyset vil gå ud igen efter fem sekunder.

## Specifikationer af varen

### Timeren

- Strømforsyning: 2 x AAA-batterier (batterier medfølger ikke)
- LCD-skærm, areal: 16 x 22 mm
- Vægt: 29g (uden batterier)
- Mål: 28L x 20B x 90H mm (uden pilleæskesken)

### Pilleæske og -rum

- Vægt: 96g
- Mål: 20L x 20B x 90H mm

