

Mepilex® Transfer

DEN EFFEKTIVE VÆSKEGENNEMTRÆNGELIG BANDAGE

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift^{1,2}
- Transporterer ekssudat væk fra såret og minimerer risikoen for maceration³
- Muliggør håndtering af sår som ellers er svære at bandagere



Tyndt skumlag

- Transporterer ekssudat væk fra såret
- Former sig efter kroppen selv på områder der ellers er svære at bandagere
- Egnede til store, væskende sår

Safetac® lag


- Reducerer smerte og traume før, under og efter bandageskift
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den tørre omkringliggende hud
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration³

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

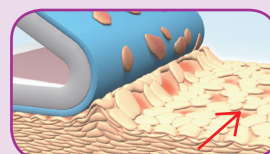


Stripping af hudceller med traditionel klæb

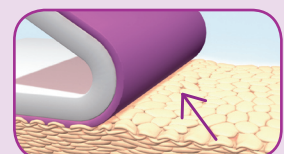


Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi


Sådan anvendes Mepilex® Transfer

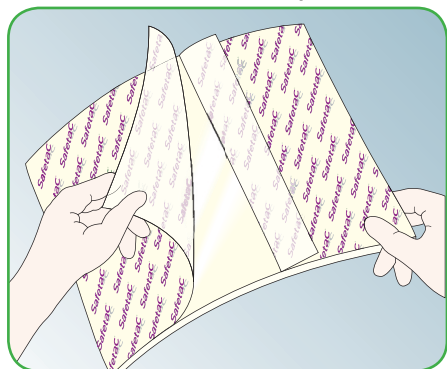

Rens såret efter normal procedure.
Fjern beskyttelsesfilmen.

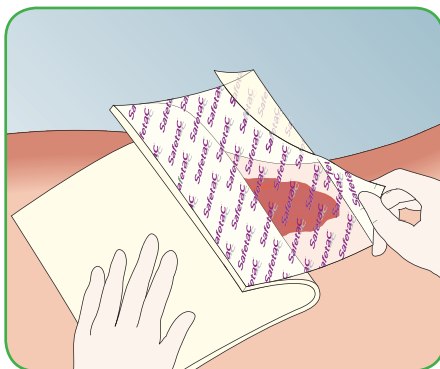

Mepilex Transfer skal overlape sårlejet med
mindst 5 cm på den omkringliggende hud.

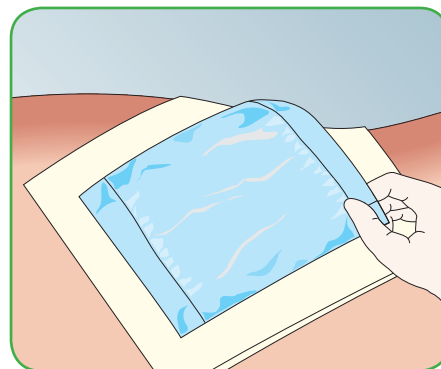

Læg den absorberende yderbandage på
(f.eks. Mesorb) og fisker.

Sådan virker Mepilex Transfer

Mepilex Transfer er en tynd og meget formbar skumbandage, der transporterer væske væk fra såret og bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegles omkring sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration. Da Safetac laget forsegles omkring såret, kan væsken på grund af skumstrukturen i Mepilex Transfer trænge vertikalt op i en sekundær absorberende bandage, hvorved et fugtigt sårmiljø opretholdes. Safetac laget sikrer atraumatisk bandageskift. Mepilex Transfer kan klippes til, så det passer til forskellige sårstørrelser og områder.

Fordele ved Mepilex Transfer

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Transporterer ekssudat væk fra såret
- Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandager
- Større patienttilfredshed, er tynd og meget behagelig at have på
- Kan anvendes under strålebehandling med uændret energimængde og stråledosis
- Velegnet til brug under kompression
- Kan klippes til, så den passer til forskellige sårstørrelser og områder, der er vanskelige at bandagere
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex Transfer er udviklet til en bred vifte af væskende sår, som svampeinficerede tumorer³, epidermolysis bullosa (EB), donorsteder, venøse bensår og fasciotomi. Mepilex Transfer kan også anvendes som beskyttelseslag på ikke-væskende sår og/eller store områder med skrøbelig hud.

Bemærk

Ved kliniske tegn på infektion bør en læge kontaktes for korrekt infektionsbehandling.



MEPILEX TRANSFER SORTIMENT (sterilt pakket)

Art.Nr.	Str.cm	Stk/indkr.	Stk/trp.krt.
294600	7,5 x 8,5	5	70
294700	10 x 12	5	50
294800	15 x 20	5	40
294502	20 x 50	2	12