

# Mepore® Pro

## Brusetæt, selvklæbende absorberende bandage

Mepore Pro er en selvklæbende, absorberende og åndbar bandage med en bagsidefilm, som beskytter såret mod vand og kontaminering. Den hudvenlige, opløsningsfri klæb giver en blid og sikker fiksering.

Brugervenligt beskyttelsespapir, der er let at fjerne.


Absorberende sårpude med et let-hæftende sårkontaktlag som giver bedre patientkomfort og lavere skiftfrekvens.

Hudvenlig, vandbaseret opløsningsfri klæb giver en sikker og blid fiksering.

Blødt, elastisk, nonwoven materiale giver bedre patientkomfort.

Virus- og bakterietæt bagsidefilm som beskytter såret mod kontaminering udefra.

Åndbar og brusetæt film. Giver en bedre patientkomfort og lavere skiftfrekvens.

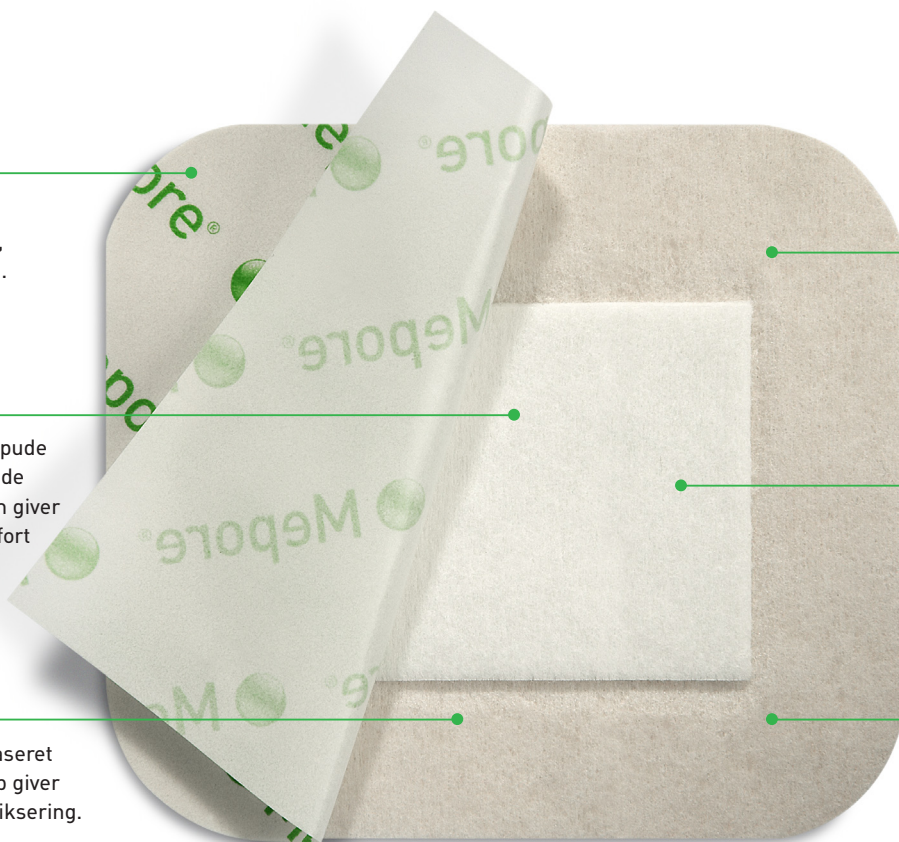

## Sådan virker Mepore Pro

Bagsidefilmen tillader brusebad og beskytter såret mod vand og kontaminering. Den beskytter også tøj og sengetøj mod blod og væskegennemsvivning.

Sårpudens høje absorptionskapacitet samt bagsidefilmens høje permabilitet, giver tilsammen en effektiv væskehåndtering. Polyakrylat klæben er hudvenlig og sikrer desuden en sikker fiksering. Beskyttelsespapiret er let at fjerne og sikrer en steril og

nem applicering af bandagen. Stabiliteten i produktets materiale/film er også med til at lette appliceringen.

## Anvendelsesområder

Mepore Pro kan anvendes på en lang række sår, som har let til moderat væskniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, mindre brandsår, rifter og hudafskrabninger.

## Sådan anvendes Mepore Pro



Pakken åbnes og bandagen tages ud.



Tag fat i de overlappende dele af beskyttelsespapiret og træk indtil klæbefladerne ses og fiksering kan påbegyndes.



Placer bandagen på huden uden at strække og fjern forsigtigt resten af beskyttelsespapiret. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning til huden. Bandagen må ikke strækkes under påsætning!

## Bandageskift

Skiftfrekvensen afhænger af sårets tilstand. Bandagen aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækstretning.

## Fordele ved Mepore Pro

- Tillader brusebad
- Det lethæftende sårkontaktag minimerer risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- Beskytter såret mod vand og kontaminering udefra
- Virus- og bakterietæt

- Optimal absorptionskapacitet
- Let aftageligt beskyttelsespapir, som letter håndteringen og giver aseptisk applikation
- Åndbar film
- Lav friktion mod tøj og sengetøj
- Hudvenlig vandbaseret klæb
- Afrundede hjørner giver sikker fiksering (alle størrelser op til 9x15 cm)

## Forholdsregler

For at sikre at der ikke opstår hudskader bør Mepore Pro ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.

## Mepore Pro er pakket sterilt og i enkelte pakninger

Art. nr.	Størrelse cm	Sårpude cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
670820	6 × 7 cm	3 × 4 cm	60	480
670920	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	40	320
671020	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	40	320
671120	9 × 20 cm	4,5 × 15 cm	30	180
671220	9 × 25 cm	4,5 × 20 cm	30	180
671320	9 × 30 cm	4,5 × 25 cm	30	270

## Apotekssortiment:

680840	6 × 7 cm	3 × 4 cm	10	140
680940	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	10	200
681040	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	10	140
681140	9 × 20 cm	4,5 × 15 cm	10	140

Mölnlycke Health Care ApS  
Gydevang 33, 3450 Allerød  
Tlf. 48 168 268  
www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care navn og logo og Mepore Pro er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

