

Disposable Mouth Guard User Manual

The mouth guard is designed to cover nose and mouth.
Please read this manual carefully before usage!

Warning


The user manual shall be made available to all users by posting it where the mouth guards are distributed or by other means.
The mouth guard should be checked before each use. Scratched or damaged mouth guards should be disposed of. It is not possible to repair the mouth guard.
The ear bands and plastic, when in contact with skin, can cause allergic reactions to susceptible users.

Applicable laws and approvals

Tested and approved according to the Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004, Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on Overall migration, Sensorial examination odour and taste test, Specific migration of Ethylene glycol & Diethylene glycol, Specific migration of Antimony, Specific migration of Acetaldehyde, Specific migration of Terephthalic Acid, Specific migration of Heavy Metal, and affects all producing, importing, using, or placing products on the European market.
Disposable mouth guards we provide are comply with (EU) No 10/2011.

Instructions for use

Remove the protection film before first use. Adjust the ear bands. Hold the mouth guard against the mouth and nose and pull the ear bands around your ears.

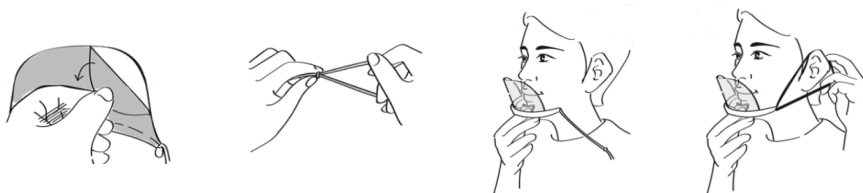

Cleaning

The mouth guard can be cleaned using a damp cloth with a disinfectant, ethanol or isopropanol is recommended.
NB! Do not dip or soak the mouth guard with alcohol or disinfectants as it will damage the product.

Storage

Storage should be made in a clean, dry place to avoid dust, scratching, and unnecessary wear.
Do not store in direct sunlight or in temperatures above 30 degrees or below 5 degrees Celsius.
Expected shelf time in un-opened packaging is more than 2 years.

Recycling

The packing should be recycled as the inner-bag as soft plastic (PE).
The mouth guard should be disposed as combustible waste.

Engangsbrug Mundvisir Brugermanual

Mundvisiret er designet til at dække næse og mund.
Læs venligst denne vejledning grundigt før brug!

Advarsel


Brugermanualen skal stilles til rådighed for alle brugere ved at placere brugermanualen, hvor mundvisirerne er distribueres eller på anden vis er udleveret til brugerne.
Mundvisiret skal kontrolleres inden brug. Ridsede eller beskadigede visir skal bortskaffes.
Det er ikke muligt at reparere mundvisiret. Øreelastikkerne og plastik kan ved kontakt med huden forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige brugere.

Gældende love og godkendelser

Testet og godkendt i henhold til standarden (EC) nr. 1935/2004 af den europæiske parlament og af Rådet for 27 oktober 2004, Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 for 14 januar 2011 på samlet træk, Sensorisk undersøgelse lugt og smag test, Specifik migration af Ethylenglycol & Diethylenglycol, Specifik migration af antimon, specifik migration af acetaldehyd, specifik migration af Terephthalic Acid, Specifik migration af tungmetaller og dets påvirkning ved produktion, import, brug eller markedsføring af produkter på det europæiske marked.
Mundvisirerne, vi leverer, er i overensstemmelse med (EU) nr. 10/2011.

Brugsanvisning

Fjern beskyttelsesfilmen før du tager visiret i brug første gang. Juster øreelastikkerne. Hold visiret mod mund og næse og træk elastikkerne over dine ører.

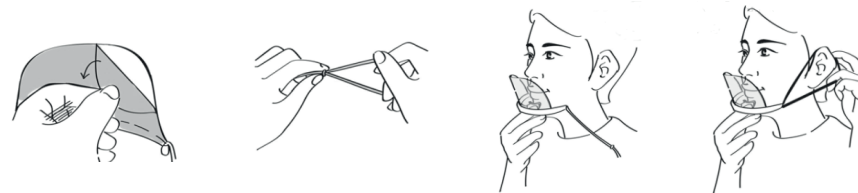

Rengøring

Mundvisiret kan rengøres med en fugtig klud med et desinfektionsmiddel (ethanol eller isopropanol anbefales).
NB! Dyp eller blød ikke mundvisiret op med alkohol eller desinfektionsmidler, da produktet vil tage skade.

Opbevaring

Mundvisiret skal opbevares rent og tørt for at undgå støv, ridser og unødvendig slid. Opbevar ikke produktet i direkte sollys eller i temperaturer over 30 grader eller under 5 grader (Celsius).
Den forventede holdbarhedstid i uåbnet emballage er mere end 2 år.

Genbrug

Den indre plastikpose kan genanvendes som blødt plast (PE).
Mundvisiret skal bortskaffes som brændbart affald.