



## Produktinformation

### Indikationer

Navina™ Systems fra Wellspect HealthCare er udviklet for at hjælpe voksne, der lider af fækal inkontinens, af kronisk forstoppelse og/eller under tidskrævende behandling af tarmen. Brugeren kan sidde i kørestol og/eller have nedsat håndfunktion. Ved at tilføre vand til tyktarmens nederste del, kan peristaltikken stimuleres, så tyktarmen og endetarmen tømmes.

### Kontraindikationer



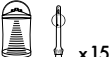
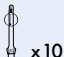



Man bør ikke anvende Navina™ Classic systemet, hvis man har en af følgende tilstande:

- Anal eller rektal forsnævring
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
- Akut divertikulitis
- Kolorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Har fået foretaget et rektalt indgreb inden for de seneste 3 måneder

- Har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger

Da listen med kontraindikationer ikke er fuldstændig, tager behandlerne også altid individuelle faktorer i betragtning.

### Navina Classic systemet

Reference	Type	Indhold	Levetid
69005	Navina Classic systemet 	1 Navina Classic kontrolenhed 1 vandbeholder 1 vandslangesæt 2 rektalkatetre 1 Navina taske	
69006	Navina Classic System normal – refill 	1 Navina Classic kontrolenhed 1 vandbeholder 1 vandslangesæt 2 rektalkatetre	
69003	Forbrugssæt normal 	1 vandbeholder 15 rektalkatetre	Kan anvendes 15 gange Kun til engangsbrug
68940	Rektalkatetersæt 	10 rektalkatetre	Kun til engangsbrug
69011	Vandslangesæt 	1 kateterslange 1 vandbeholderslange	Kan anvendes 100 gange Kan anvendes 100 gange
69012	Tilbehørsæt 	2 griberinge (1 lodret, 1 vandret) 1 sikkerhedsbånd 1 fikseringsbånd 1 Navina Smart fikseringsklemme (anvendes kun til Navina Smart)	
69013	Navina Classic kontrolenhed 	1 Navina Classic kontrolenhed	Kan anvendes 100 gange

Alle Navina Classic komponenter kan bortskaffes som husholdningsaffald.

# En velfungerende mave – et godt liv

- Hydrofilt engangskateter med afrundet spids sikrer maksimal komfort, hygiejne og sikkerhed
- Fleksibelt ballondesign lukker af for endetarmen, så kateteret bliver på plads, og sikrer dette under hele behandlingen
- Godt greb med konektor letter håndteringen
- Ballonerne testes individuelt for at sikre optimal funktion og en tilstrækkelig sikkerhedsmargin mellem den maksimale oppustning og bristepunktet

## ENGANGS- KATETER

## VAND- BEHOLDER

- Lille sammenklappelig vandbeholder til diskret opbevaring og transport
- Stabil og med en integreret skala, der sikrer nøjagtighed
- Med ét enkelt kammer er den nem at fylde og tømme
- Nem at åbne og lukke, selv med nedsat styrke og funktion i hænderne
- Integreret låg (montering ikke nødvendig) med trykventil, som giver øget sikkerhed

- Vandpumpe og oppustningspumpe med farvekodet letter forståelsen
- Nem pumpefunktion, med eller uden fastgørelse af enheden til benet
- Store, intuitive betjeningsknapper

## MANUEL PUMPE

## SLANGER

- Nemme at få fat i og håndtere
- Faste konnektorer med farvekoder sikrer intuitiv korrekt montering
- Nemme at rengøre