

Dansac Novalife Produktdatablad

Dansac Novalife lukkede poser, 1- og 2-dels



Dansac Novalife Produktoversigt

NOVALIFE						
Dansac Novalife 1 Lukket		Mini	Midi	Midi	Maxi	Maxi
Længde x bredde		175 x 130	190 x 145	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet		360 ml	470 ml	470 ml	620 ml	620 ml
		Farvet	Farvet	Klar	Farvet	Klar
Max opklippelig (Længde x Bredde)		38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm	70/90 mm
Hulstørrelse		REF	REF	REF	REF	REF
10 mm (opklippelig)		903 - 10	901 - 10	902 - 10	905 - 10	906 - 10
25 mm (opklippelig)		903 - 25	901 - 25	902 - 25		
30 mm (opklippelig)		903 - 30	901 - 30	902 - 30		
35 mm (opklippelig)		903 - 35	901 - 35	902 - 35		
40 mm (opklippelig)			901 - 40	902 - 40		
45 mm (opklippelig)			901 - 45	902 - 45		
50 mm (opklippelig)			901 - 50	902 - 50		

NOVALIFE						
Dansac Novalife 2 Plade		36 mm	43 mm	55 mm	70 mm	
Længde x bredde			72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Ringstørrelse	Hulstørrelse mm	Opklippelig til	REF	REF	REF	REF
36 mm	10 mm (opklippelig) 20 mm (opklippelig) 25 mm (opklippelig)	28 mm	1736 - 10 1736 - 20 1736 - 25			
43 mm	10 mm (opklippelig) 25 mm (opklippelig) 30 mm (opklippelig)	35 mm		1743 - 10 1743 - 25 1743 - 30		
55 mm	10 mm (opklippelig) 35 mm (opklippelig) 40 mm (opklippelig)	47 mm			1755 - 10 1755 - 35 1755 - 40	
70 mm	10 mm (opklippelig)	62 mm				1770 - 10

NOVALIFE				
Dansac Novalife 2 Lukket		Mini	Midi	Midi
Længde x bredde		175 x 130	190 x 145	190 x 145
Kapacitet		260 ml	350 ml	350 ml
		Farvet	Farvet	Klar
Ringstørrelse		REF	REF	REF
36 mm		1303 - 36	1301 - 36	1302 - 36
43 mm		1303 - 43	1301 - 43	1302 - 43
55 mm		1303 - 55	1301 - 55	1302 - 55
70 mm			1301 - 70	1302 - 70

CE Marked products meet strict European-wide safety and performance criteria (MDD 93/42).

Dansac Novalife egenskaber

1- og 2-dels lukkede poser



1 Aftagnings-“øre”
Et orange aftagnings-“øre” sikrer, at dækfilmen let kan tages af klæberen og pladen let kan tages af huden efter brug.

2 Topplaceret starthul
Starthullet er placeret i toppen af den ovale plades klippeguide, hvilket betyder at posen sidder lavere på maven. Posen kan lettere skjules under tøjet og giver derved øget diskretion.

3 Vandafvisende stoffbeklædning
Den bløde stoffbeklædning er vandafvisende og efterlader ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et håndklæde efter bad. Novalife posen forbliver tør, selv når det er varmt og man sveder.

4 Oval klæber
Den unikke ovale facon følger kroppens kurver og sikrer at klæbermaterialet er placeret i siderne og fornedden, hvor der er mest brug for det.

5 Effektivt Novalife filter
Membranen på begge sider af Novalife filteret beskytter mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse og samtidig giver øget lugtkontrol.

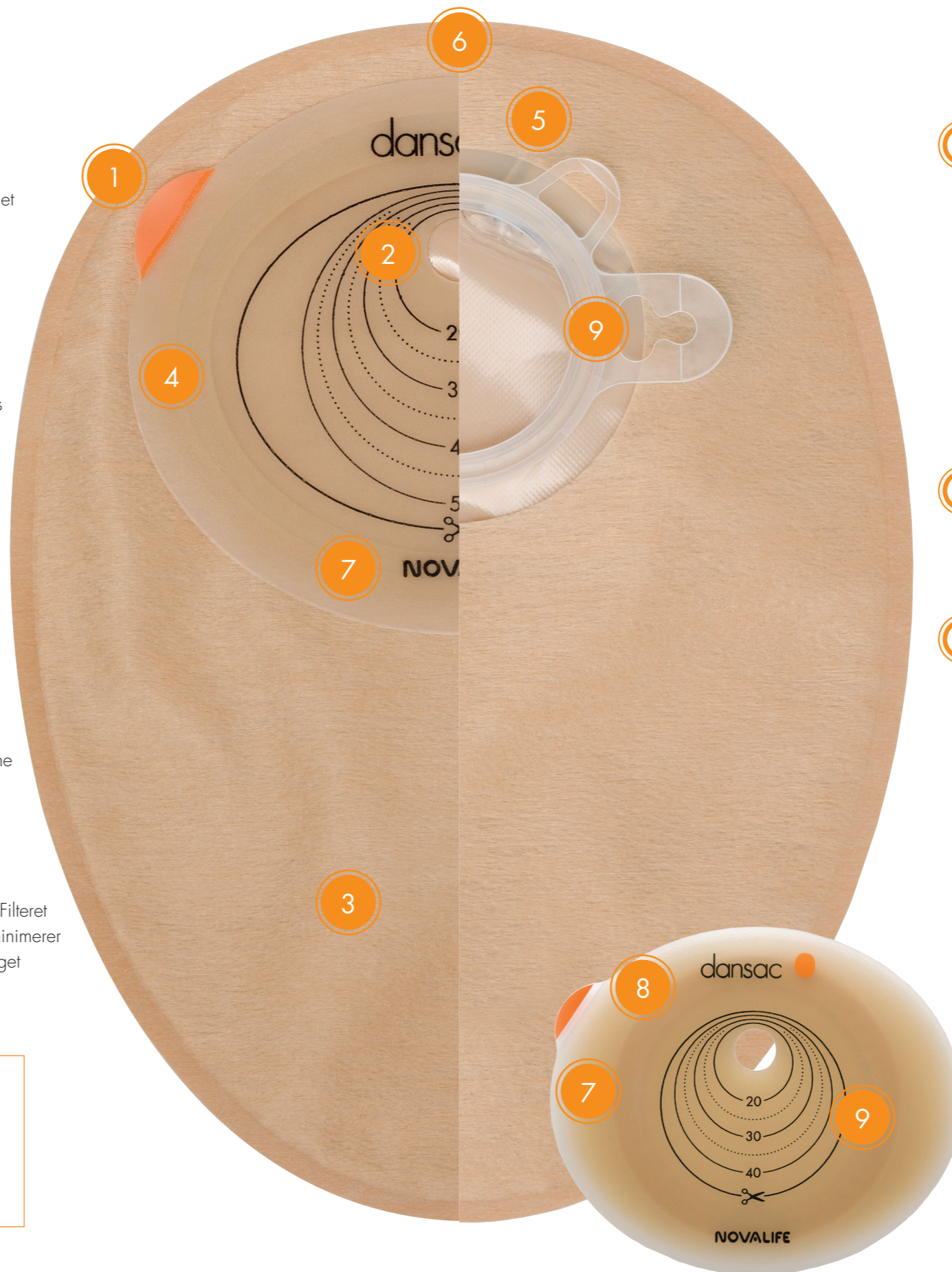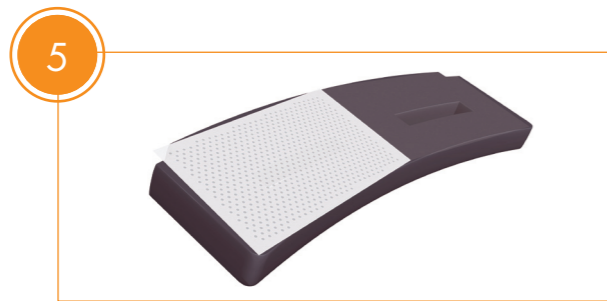

6 Lav poseprofil
Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i posen.

7 Sikker klæber
Klæberen på pladen er graderet, således at den er tykkest omkring stomien og bliver tyndere ud mod kanten. Mere materiale omkring stomien giver bedre beskyttelse af huden (mere absorberingsmateriale) og øger sikkerheden mod lækage.



8 Hudvenlig klæber
Den hudvenlige sammensætning i GX Hydrocolloid klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der beskytter huden omkring stomien.

9 Sikker og fleksibel kobling
Posen og pladen sættes sammen med et sikkert koblingssystem. Kliklukningen giver ekstra sikkerhed. Ringen på pladen er løftbar, hvilket minimerer tryk på maven.

