

NovaLife Soft Convex

Produktdatablad

NovaLife 1 Åben Soft Convex Med EasiView™ vindue

NOVALIFE	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	FARVET	FARVET	FARVET	FARVET
Hulstørrelse	REF	REF	REF	REF
15-24 mm	981-24			
25 mm	981-25			
15-34 mm		981-34		
30 mm		981-30		
35 mm		981-35		
15-54 mm				981-54
40 mm			981-40	
45 mm			981-45	

Specifikationer

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade	107 x 91 mm	130 x 110 mm	130 x 110 mm	150 x 127 mm
Højde x bredde	239 x 144 mm	239 x 144 mm	259 x 158 mm	259 x 158 mm
Kapacitet	350 ml	360 ml	520 ml	500 ml
Æsker á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

NovaLife 1 Lukket Soft Convex Med EasiView™ vindue

NOVALIFE	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	FARVET	FARVET	FARVET	FARVET
Hulstørrelse	REF	REF	REF	REF
15-24 mm	971-24			
25 mm	971-25			
15-34 mm		971-34		
30 mm		971-30		
35 mm		971-35		
15-54 mm				971-54
40 mm			971-40	

Specifikationer

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade	107 x 91 mm	130 x 110 mm	130 x 110 mm	150 x 127 mm
Højde x bredde	239 x 144 mm	239 x 144 mm	259 x 158 mm	259 x 158 mm
Kapacitet	450 ml	430 ml	590 ml	570 ml
Æsker á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

NovaLife **Soft Convex**

Sikkerhed, tryk og komfort

Lav poseprofil

Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Det gør posen mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i den.

Aftagningsøre

Klæberen fjernes enkelt og sikkert ved hjælp af det synlige ikke-klæbende aftagningsøre.

Oval klæber

Klæberens ovale form passer til kroppens naturlige former og sikrer, at klæbematerialet er placeret netop der, hvor der er størst behov for det.

Et skånsomt tryk det rigtige sted

Det bløde og fleksible konvekse indlæg sikrer, at bandagen lægger et skånsomt tryk tæt på stomien. Stomien skubbes ind i posen, og der skabes en bedre forsegling mellem hud og klæber.



Hudvenlig klæber

Sammensætningen i GX hydrokolloid klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der beskytter huden omkring stomien. Klæberen har bevist sin hudvenlighed i mange år.

Gradueret klæber


Klæberens overflade er tykkest inde ved stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, så vedhæftningen på huden er både sikker og skånsom.

dansac
NOVA

20
30
40
50
MA

Effektivt NovaLife filter

Membraner på begge sider af NovaLife filteret beskytter mod posens indhold og mod vand udefra og gør brugen af filterbrikker unødvendig. Filteret filtrerer hurtigt en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse i posen.

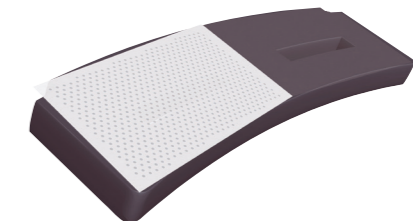

EasiView™ - vindue



Gør det lettere at inspicere stomien og placere bandagen korrekt.



Vandafvisende stofbeklædning

Posens bløde stof er vandafvisende og forbliver tørt også ved badning.

Integrerede bælteører

Hvis der er behov for et yderligere tryk gør de stærke, men samtidig fleksible bælteører det let at fastgøre et Dansac bælte til bandagen.



N4
Soft Convex
generation

NOVALIFE
The next generation

dansac