

Produktdatablad

Dansac Nova 1 Convex pose (med kulfilter)

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
Land: Danmark
Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
Tlf. nr.: 4846 5100
Fax nr.: 4846 5110
E-mail: dk.salg@dansac.com
Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1 Convex

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	Papir:	Glas:
Metal:	Latex:	Bomuld: <input checked="" type="text"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PET non-woven, LDPE, Aktivt kul, PTFE membran PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐ Ja: ☒ Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☒ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 1 Convex poser

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
831-24	831-24	5709817373912	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	15-24	10 stk	10 æsker	-	nej
831-37	831-37	5709817373943	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	15-37	10 stk	10 æsker	-	nej
831-46	831-46	5709817373974	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej
831-20	831-20	5709817374001	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	20	10 stk	10 æsker	-	nej
831-25	831-25	5709817374032	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	25	10 stk	10 æsker	-	nej
831-30	831-30	5709817374063	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	30	10 stk	10 æsker	-	nej
831-35	831-35	5709817374094	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	35	10 stk	10 æsker	-	nej
831-40	831-40	5709817374124	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	40	10 stk	10 æsker	-	nej
831-45	831-45	5709817374155	Dansac Nova 1 Convex, luk. Farvet	45	10 stk	10 æsker	-	nej
832-24	832-24	5709817374186	Dansac Nova 1 Convex, luk. Klar	15-24	10 stk	10 æsker	-	nej
832-37	832-37	5709817374216	Dansac Nova 1 Convex, luk. Klar	15-37	10 stk	10 æsker	-	nej
832-46	832-46	5709817374247	Dansac Nova 1 Convex, luk. Klar	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 1 Convex lukkede poser

Produktinformation

Anvendelsesområde: Kolostomi.
Dansac Nova 1 lukkede poser (en-dels produkt) har den velkendte GX-hydrocolloid basisplade og et filter der ikke tillader lugt at passere og reducerer risikoen for vacuum og ballondannelse.

Anvendeligt ved stomi beliggende i en meget dyb hudfold eller ved dybt nedsunket stomi. Bruges i de tilfælde hvor en Nova 2 X-3 Basisplade eller Nova 2 Soft Convex 5mm Basisplade ikke kan bruges., men hvor en "hård" konveks basisplade er nødvendig.


Filter: 100% aktivt kul, garanteret lugtfrit i op til 48 timer.
En polyethylene membran beskytter filteret indefra, dette forhindrer lugt og afføring at passere filteret.

Posefilm: Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.

Backing: Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.

Basisplade: Gradueret plade. 6,00mm omkring stomien og 0,90mm ved kanten.

Sortiment:

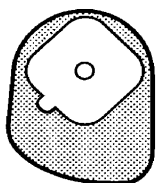

Dansac Nova 1 Convex
Kapacitet: 480 ml
Farvet: Ref 831-24, 831-20, 831-25. (A)
Klar: Ref 832-24 (B)

Dansac Nova 1 Convex
Kapacitet: 550 ml
Farvet: Ref 831-37 til 831-46. (A)
Klar: Ref 832-37, 832-46 (B)

(A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.

(B) Findes i opklippelig