

Flexima® Active, tømbar med filter

med en unik elastisk hudklæber

Indikation



- Ileostomi samt kolostomi med behov for tømbar pose

Egenskaber

- Patenteret elastisk hudklæber der
 - har en behagelig bærekraft
 - giver stor flexibilitet, er god til at tilpasse sig hudkonturer
 - ikke efterlader klæberester på huden
 - giver god hudbeskyttelse
 - har lille risiko for maseration
 - har øjeblikkelig vedhæftning
 - giver mulighed for repositionering
- Klæberen er påsat højt oppe på posen, hvilket giver en bedre komfort, samt diskretion
- Opklipbar klæber i str.:
 - mini: 15-45 mm
 - midi: 15-50 mm
 - maxi: 15-65 mm eller 15-80 mm
- **Nyhed:** Nyt og bredere udløb, der gør tømning og rengøring lettere og mere hygiejnisk. Nu fylder posen ikke mere end en lukket pose
- **Nyhed:** Findes nu også med inspektionsvindue, der gør det muligt at observere stomien. og kan være en hjælp ved påsætning af posen.

Produktbeskrivelse

- 1-dels tømbar stomipose m. filter
- Blomsterformet elastisk hudklæber, der følger huden
- 5 forudstansede udgaver
- Transparent og beige
- 3 str. – mini, midi og maxi
- Opklipbare poser med inspektionsvindue i mini, midi og maxi

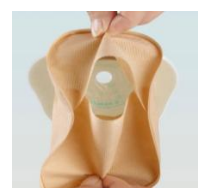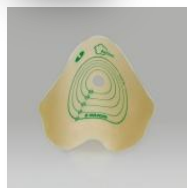

Flexima® Active har

- ✓ en helt unik sikker, elastisk og smidig hudklæber
- ✓ et nemt og sikkert udløb, der er meget diskret – næsten som en lukket pose og hygiejnisk og nemt at tømme
- ✓ et inspektionsvindue der giver mulighed for at observere stomien samt gør påsætning nemmere

Varenr.	Varenr. med inspektionsvindue	Produktnavn, Beige	Salgsenhed /æske
4620115N	NY 4622115N	Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 15-50 mm	30 stk.
4620125N	-	Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 25 mm	30 stk.
4620130N	-	Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 30 mm	30 stk.
4620135N	-	Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 35 mm	30 stk.
4620140N	-	Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 40 mm	30 stk.
4620380N	NY 4622380N	Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-65 mm	30 stk.
4620480N	-	Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-80 mm	30 stk.
4620215N	NY 4622215N	Flexima Active Tømbar m. filter, Mini 15-45 mm	30 stk.



Påsætning af posen

Stå op eller sid ned uden at trække i huden eller læne overkroppen bagud under påsætningen – derved strækkes huden.

Hjælp evt. påsætningen på vej ved at folde stomiposen. Dette kan give et bedre overblik, når posen skal sættes på.

Det er muligt at løsne klæberen og atter påsætte den, hvis man ikke helt var tilfreds med resultatet.

Et godt tip til aftagning er at trække klæberen nedad og ikke trække udad i klæberen.

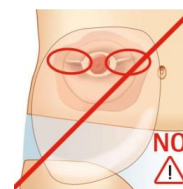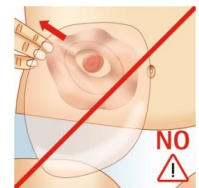

Varenr.	Varenr. med inspektionsvindue	Produktnavn, Beige	Salgsenhed /æske
4620115N	NY 4622115N	Flexima Active Tøbar m. filter, Midi 15-50 mm	30 stk.
4620125N	-	Flexima Active Tøbar m. filter, Midi 25 mm	30 stk.
4620130N	-	Flexima Active Tøbar m. filter, Midi 30 mm	30 stk.
4620135N	-	Flexima Active Tøbar m. filter, Midi 35 mm	30 stk.
4620140N	-	Flexima Active Tøbar m. filter, Midi 40 mm	30 stk.
4620380N	NY 4622380N	Flexima Active Tøbar m. filter, Maxi 15-65 mm	30 stk.
4620480N	-	Flexima Active Tøbar m. filter, Maxi 15-80 mm	30 stk.
4620215N	NY 4622215N	Flexima Active Tøbar m. filter, Mini 15-45 mm	30 stk.