

Mepilex® Border Ag

DEN EFFEKTIVE ANTIMIKROBIELLE ABSORBERENDE ALT-I-EN BANDAGE

- Minimerer traume og smerte ved bandageskift^{1,2,3}
- Hurtig og vedvarende antimikrobiel virkning⁵
- God og effektiv væskehåndtering
- Sikker fiksering og alligevel atraumatisk aftagning

Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt
- Bakterie- og virusbarriere*

Safetac® lag

- Reducerer smerte og traume før, under og efter bandageskift¹
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den omkringliggende hud³
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration⁴

Flerlags absorberende skumpude

- Den komprimerede skum med sølv, absorberer og spreder væsken samtidig med at sølvet frigives
- Fibrelag som fastholder væsken i bandagen

Hurtig og vedvarende frigivelse af sølvioner

- Antimikrobiel virkning indenfor 30 minutter og i op til 7 dage⁵


* Mikrober større end 25 nm

Safetac® teknologi

Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

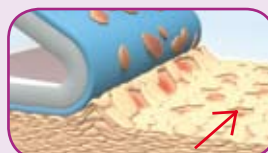


Stripping af hudceller med traditionel klæb




Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi

Sådan anvendes Mepilex® Border Ag

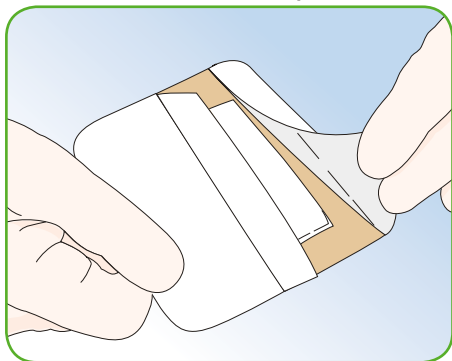

Rens såret.
Fjern beskyttelsesfilmen.

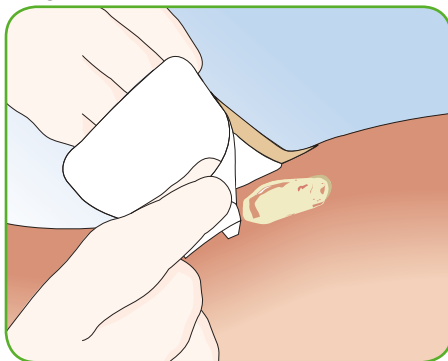

Applicér den klæbende side mod såret.
Stræk ikke bandagen.

Sådan virker Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag er en antimikrobiel alt-i-en skumbandage med effektiv væskehåndterings- og retentionsevne, som bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration. Safetac laget sikrer, at bandagen kan skiftes uden at beskadige såret eller den omkringliggende hud og mindsker derved smerte hos patienten. Mepilex® Border Ag inaktiverer sårrelaterede patogener indenfor 30 minutter og opretholder effekten i op til 7 dage. Ved at reducere antallet af mikroorganismer kan Mepilex® Border Ag mindske lugtgener.

Fordele ved Mepilex® Border Ag

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Selvklæbende - ingen sekundær fiksering nødvendig
- Brusetæt
- Kan anvendes under kompression
- Er behagelig at anvende for patienten
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex® Border Ag er udviklet til en bred vifte af moderat til kraftigt væskende sår som ben- og fodsår, tryksår, smertefulde sår, delhudsforbrændinger, traumatiske og kirurgiske sår. Mepilex® Border Ag kan anvendes på disse sår hvor et fugtigt sårmiljø, væskehåndtering, effektiv fiksering og en antimikrobiel virkning er nødvendig.

For yderligere information, se venligst brugervejledningen.



MEPILEX® BORDER AG SORTIMENT (Sterilt pakket)

Art. nr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395700	10 x 25	5	35
395900	10 x 30	5	35
Mepilex® Border Ag Sacrum			
382000	18 x 18	5	40
382200	20 x 20	5	40
382400	23 x 23	5	25