

Produktdatablad

Dansac Nova 2 pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1, 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 2

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input type="checkbox"/>
Andet: _____		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester, LDPE, Aktivt kul, PTFE, PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen

Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen

Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen

Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 2 poser

Sortimentsoversigt

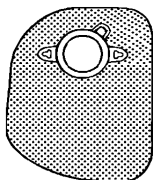
Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartone pr. palle	Steril
1203-36	1203-36	5709817404760	Dansac Nova 2 Mini, luk, farvet	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1203-43	1203-43	5709817404913	Dansac Nova 2 Mini, luk, farvet	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1203-55	1203-55	5709817405156	Dansac Nova 2 Mini, luk, farvet	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1201-36	1201-36	5709817309638	Dansac Nova 2 Midi, luk, farvet	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1201-43	1201-43	5709817309669	Dansac Nova 2 Midi, luk, farvet	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1201-55	1201-55	5709817309690	Dansac Nova 2 Midi, luk, farvet	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1201-70	1201-70	5709817309720	Dansac Nova 2 Midi, luk, farvet	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1202-36	1202-36	5709817309751	Dansac Nova 2 Midi, luk, klar	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1202-43	1202-43	5709817309782	Dansac Nova 2 Midi, luk, klar	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1202-55	1202-55	5709817309812	Dansac Nova 2 Midi, luk, klar	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1202-70	1202-70	5709817309843	Dansac Nova 2 Midi, luk, klar	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1211-43	1211-43	5709817310146	Dansac Nova 2, tømb, sym, farvet	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1211-55	1211-55	5709817310177	Dansac Nova 2, tømb, sym, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1213-43	1213-43	5709817309904	Dansac Nova 2, tømb, asym, farvet	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1213-55	1213-55	5709817309935	Dansac Nova 2, tømb, asym, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1219-36	1219-36	5709817405309	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, farvet	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1219-43	1219-43	5709817405330	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, farvet	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1219-55	1219-55	5709817405576	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1220-36	1220-36	5709817405606	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, klar	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1220-43	1220-43	5709817405873	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, klar	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1220-55	1220-55	5709817405903	Dansac Nova 2 FoldUp Mini, tømb, klar	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1215-36	1215-36	5709817362725	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, farvet	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1215-43	1215-43	5709817367236	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, farvet	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1215-55	1215-55	5709817367294	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej

1215-70	1215-70	5709817367324	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, farvet	70	10 stk.	10 æsker	-	nej
1216-36	1216-36	5709817362930	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, klar	36	10 stk.	10 æsker	-	nej
1216-43	1216-43	5709817367416	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, klar	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1216-55	1216-55	5709817367386	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, klar	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1216-70	1216-70	5709817367355	Dansac Nova 2 FoldUp Midi, tømb, sym, klar	70	10 stk.	10 æsker	-	nej
1221-55	1221-55	5709817502725	Dansac Nova 2 FoldUp Maxi, tømb, sym, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1221-70	1221-70	5709817502848	Dansac Nova 2 FoldUp Maxi, tømb, sym, farvet	70	10 stk.	10 æsker	-	nej
1222-55	1222-55	5709817502961	Dansac Nova 2 FoldUp Maxi, tømb, sym, karl	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1222-70	1222-70	5709817503081	Dansac Nova 2 FoldUp Maxi, tømb, sym, karl	70	10 stk.	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 2 lukkede poser

Produktinformation

- Anvendelsesområde:** Kolostomi.
Dansac Nova 2 lukkede pose (to-dels produkt) har et filter der har dobbel så stor kapacitet end tidligere Dansac filtre. Filteret tillader ikke lugt at passere og reducerer risikoen for vacuum og ballondannelse.
- Filter:** Dobbeltlag 100% aktivt kul, garanteret lugtfrit i op til 48 timer.
En polyethylene membran beskytter filteret indefra, dette forhindrer lugt og afføring at passere filteret.
Dansac Nova 2 posen er designet med en "skulder"-form hvor filteret er placeret væk fra stomi output.
- Posefilm:** Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing:** Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.
- Sortiment:**

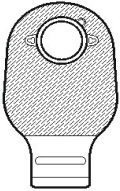
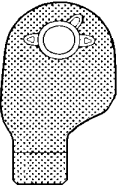
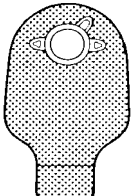


Dansac Nova 2 Mini
Kapacitet: 200 ml
Farvet: Ref 1203-36 til 1203-55.

Dansac Nova 2 Midi
Kapacitet: 450 ml
Farvet: Ref 1201-36 til 1201-70.
Klar: Ref 1202-36 til 1202-70.

Dansac Nova 2 tømbare poser

Produktinformation

- Anvendelsesområde:** Ileostomi.
Dansac Nova 2 tømbare pose (to-dels produkt) har 2 posekamre for ekstra filterbeskyttelse der er specielt designet til ileostomier og til brug om natten. Den afkortede posefilm i det 70mm brede udløb letter tømning.
- Filter:** Nova dobbelt lags filter af 100% aktivt kul
En ydre teflon membran beskytter filteret mod lækage gennem filteret og beskytter filteret udefra mod fugt.
- Posefilm:** Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing:** Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.
- Sortiment:**
- Dansac Nova 2 FoldUp Mini
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 330 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 1219-36 til 1219-55
Symmetrisk, klar: Ref 1220-36 til 1220-55
- 
- Dansac Nova 2 FoldUp Midi
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 590 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 1215-36 til 1215-70
Symmetrisk, klar: Ref 1216-36 til 1216-70
- Dansac Nova 2 FoldUp Maxi
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 820 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 1221-55 & 1221-70
Symmetrisk, klar: Ref 1222-55 & 1222-70
- 
- Dansac Nova 2
Lukning: med clips / klemme lukning
Kapacitet: 600 ml
Asymmetrisk, farvet: Ref 1213-43 og 1213-55
- 
- Symmetrisk, farvet: Ref 1211-43 og 1211-55